


# Flow-Ball **ULTRA**®

By POWERbreathe®



## So geht's los:

Bevor Sie starten, stecken Sie den Korb und den Stiel zusammen. Nun ist der Flow-Ball ULTRA® einsatzbereit.

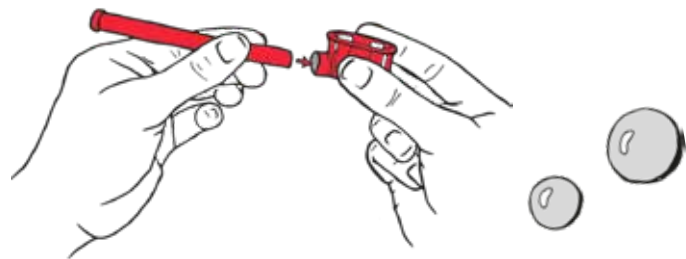


---

## Einsatzmöglichkeiten mit dem Flow-Ball ULTRA®:

- > Den Ball hochpusten und möglichst lange in der Luft halten.
- > Den Ball beliebig oft hochpusten und im Pfeifenkorb wieder auffangen.
- > Den Ball hochpusten, sich dabei ein oder mehrere Mal um die eigene Achse drehen.
- > Den Flow-Ball ULTRA® leicht nach unten oder oben neigen, so dass sich der Ball beliebig schnell um die eigene Achse dreht.
- > Ein Gefäß auf den Tisch stellen und aus einiger Entfernung durch kräftiges Pusten den Ball in die Öffnung befördern.
- > Den Ball hochpusten und durch Neigen des Flow-Ball ULTRA® dem Partner zuspiesen. Dieser übernimmt ihn durch Pusten im Bereich seines Luftkegels. Er hält den Ball so lange in der Luft, bis sein Mitspieler wieder eingeatmet hat und den Ball übernehmen kann. Dieser Vorgang kann beliebig lange fortgesetzt werden (auch mit mehreren Personen)
- > Auch als Gesellschaftsspiel in der Tischrunde geeignet.

# Acht Widerstände

# hoch

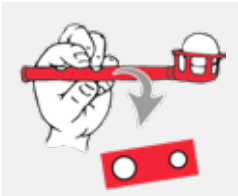

HALTEN SIE BEIDE ÖFFNUNGEN GESCHLOSSE.

HALTEN SIE DIE GROÖE ÖFFNUNG GESCHLOSSEN.

HALTEN SIE DIE KLEINE ÖFFNUNG GESCHLOSSEN.

HALTEN SIE BEIDE ÖFFNUNGEN OFFEN.

**Widerstandstufe 1 = geringer Widerstand / Widerstandstufe 4 = hoher Widerstand**

## 2 unterschiedliche Bälle ergibt 8 verschiedene Widerstände



Mit dem kleinen Ball erreichen Sie einen geringen Widerstand, der große Ball ist für fortgeschrittene Übungen, mit ihm erzielen Sie einen höheren Widerstand.

## Pflege und Wartung

Da der Flow-Ball ULTRA® während der Nutzung mit Speichel Berührung kommt, empfehlen wir, den Flow-Ball ULTRA® nach jeder Verwendung zu reinigen. Trennen Sie den Korb vom Röhrchen und reinigen Sie alle Teile mit Seifenwasser. Spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab, trocknen Sie sie gründlich und setzen Sie sie wieder zusammen. Wir empfehlen Ihnen zudem, das Gerät einmal wöchentlich mit speziellen Reinigungstabletten zu reinigen.

C E

Flow-Ball ULTRA ist kein Spielzeug. Das Gerät wurde ausschließlich zum Trainieren der Atemmuskulatur entwickelt. Eine anderweitige Verwendung ist nicht vorgesehen. Das in diesem Handbuch enthaltene Material dient lediglich Informationszwecken. POWERbreathe International Ltd gewährt keinerlei Zusicherungen oder Garantie in Bezug auf dieses Handbuch oder die darin beschriebenen Produkte. Wir übernehmen ferner keinerlei Garantie hinsichtlich der Anwendung bzw. der Ergebnisse der Anwendung des Gerätes.

POWERbreathe International Ltd haftet nicht für unmitteldbare, mittelbare, versehentliche, Folge- oder Sonderschäden, die durch eine Zweckenfremdung oder einen nicht sachgemäßen Gebrauch dieses Materials oder der hierin beschriebenen Produkte entstehen oder damit in Zusammenhang stehen.

Das Flow-Ball ULTRA-Produkt ist ein geschütztes Muster. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen auf Grundlage der fortlaufenden Entwicklungstätigkeit beim Hersteller vorbehalten.

Das POWERbreathe Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der POWERbreathe Holdings Ltd. Alle POWERbreathe Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragenen Warenzeichen der POWERbreathe Holdings Ltd.